

Rörordning vid venös provtagning

Dokumentet visar i vilken ordning de olika odlingsflaskorna samt rören ska tas vid venös provtagning.

Exempel 1: Du ska utföra en venös provtagning med två par blododlingsflaskor, två med grått/blått lock och två med orange/guld lock.

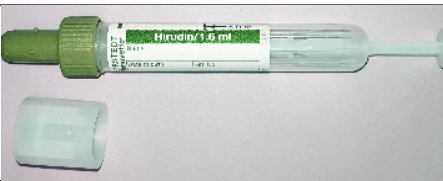
- Börja med att desinficera membranet på "slaskröret" (rör utan tillsats som kasseras) samt membranet på odlingsflaskorna. Ta sedan första odlingsflaskparet, grått/blått lock, orange/guld lock och fortsätt sedan med andra paret, grått/blått lock, orange/guld lock.

Exempel 2: Du ska utföra en venös provtagning med två par blododlingsflaskor, två med grått/blått lock och två med orange/guld lock samt ett lila, ett gult, ett blått (koagulationsrör) och ett grönt rör.

- Börja med att desinficera membranet på det blå **slaskröret**, **det blå** koagulationsröret och odlingsflaskorna. Ta det blå koagulationsröret och ta sedan odlingsflaskan med grått/blått lock, odlingsflaskan med orange/guld lock, odlingsflaskan med grått/blått lock och odlingsflaskan med orange/guld lock och till sist det gula, det gröna, det lila röret.

Rörordningen är **viktig** då innehållet i de olika behållarna/rören kan föras över mellan varandra och påverka resultatet av de olika analyserna.

Rör-ordning	Artikel nummer	Odlingsflaskor/rör	Proppfärg. Tillsats, dragvolym
		Vid blododling utan annan provtagning tas ett "slaskrör" utan tillsats med desinficerat membran på vuxna samt på barn > 15kg. Slaskröret kasseras. Sprita även av odlingsflaskornas membran.	
		Vid blododling med samtidig annan provtagning tas ett Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp) som "slaskrör" innan blododling på vuxna samt på barn > 15kg. "Slaskröret" som tas innan blododling för att avskilja den första blodvolymen kan användas vid behov för kliniskt kemiska analyser. Sprita av membranerna på samtliga provrör som ska tas innan blododlingen. Sprita även av odlingsflaskornas membran. Ta blododlingsflaskorna så tidigt som möjligt i rörordningen. OBS! Om blododling och koagulationsprov ska tas vid samma tillfälle ska koagulationsprov alltid tas innan blododlingen.	
1	Lämnas ut av Klinisk mikrobiologi		Blododlingsflaska Aerob, Grå kapsyl, blå ring Optimal mängd 8-10 mL blod
2	Lämnas ut av Klinisk mikrobiologi		Blododlingsflaska Anaerob Orange kapsyl, guld ring Optimal mängd 8-10 mL blod
3	Lämnas ut av Klinisk mikrobiologi		Blododlingsflaska Peds Plus Rosa kapsyl, grå ring Optimal mängd 1-3 mL

Rör- ordning	Artikel nummer	Rör	Proppfärg. Tillsats, dragvolym
1	47996		Ljusblå/gul CTAD, drar 3,5 mL Förvaras mörkt innan användning
2	47995		Ljusblå/svart, drar 3,5 mL, Na-Citrat- tillsats alternativ till CTAD- rör. Får ej skickas i rörpost.
3	Utlämnas av Klin kem lab USÖ		Hirudinrör, 1,6 mL. Till trombocythämning. Får ej skickas i rörpost
4	61092		Röd Koag.aktivator, 6 mL
5	61103		Guldgul med gel, 3,5 mL
6	61106		Guldgul med gel, 5 mL
7	61100		Mintgrön Li-heparin med gel, 3 mL
8	61111		Grön, Li-heparin utan gel, 4 mL
9	61109		Mörkblå/svart Na-heparin, 6 mL

10	61095		Lila EDTA, 4 mL
11	61096		Lila EDTA, 6 mL
12	61883		K2EDTA med gel, 5mL PPT Plasma Preparation Tube
13	53688		Rosa/Grå Citronsyra-Citrat- NaF 3 mL
		Li-heparinrör med gel, mintgrön propp, 3 mL, ska alltid tas som slaskrör innan Quantiferonrör även när andra venprover har tagits.	
14	61131	 Fyll varje quantiferonrör med korrekt volym (1 ml), se markeringen på rörets etikett. Provet tas i följande rörordning: NIL (grå kork), TB1-antigen (grön kork), TB2-antigen (gul kork) och Mitogen (lila kork).	Quantiferon Provtagningsset för TBC, 4 rör